


Anleitungen zur Probenahme - PFERD

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

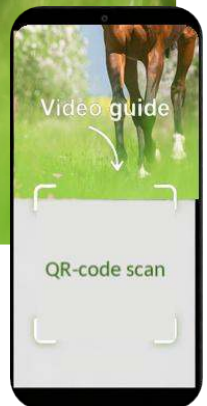

- ✓ Haarwurzeln
- ✓ EDTA-Blutprobe (nur vet. Personal)



Anleitungen zur Probenahme- PFERD

Haarwurzeln

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Vorbereitungen

Entnahmeset zur Hand?

Rückseite der Probenkarte ausfüllen

Vom Einsender auszufüllen | To be filled in by the sender:

Auftragsnummer | Order number

Name des Probenehmers | Sampler name*

Tiername | Animal name*

Entnahmedatum | Date sampled*

Kein Entnahmeset zur Hand?

Probenkarte herstellen

Papierzettel ihrer Wahl

Handschriftliche Angaben zu:

- ☐ Tiername
- ☐ Tel. für Rückfragen
- ☐ Auftragsnummer der Onlinebestellung

Tiername:
Tel. für Rückfragen:
Auftragsnummer der Onlinebestellung:

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- PFERD

Haarwurzeln

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Probenahme

➡ 60–80 Mähnen- oder Schweifhaare zupfen

➡ Haare mit Klebestreifen auf Probenkarte fixieren

Videoanleitung



Hinweise


- 👉 **Anforderungen an die Haare vor Entnahme:**
 - Trocken
 - Frei von Pflegeprodukten (ideal: vier Tage nach letzter Behandlung)
- 👉 **Haarentnahme:**
 - Haare mit Haarwurzeln
- 👉 **Haarbefestigung auf Probenkarte:**
 - gut gebündelt, ohne Kontakt zu Haarwurzeln- mit Klebestreifen fixiert

Fertige Probenkarte

Generatio Probenkarte aus Entnahmeset



Selbst erstellte Probenkarte

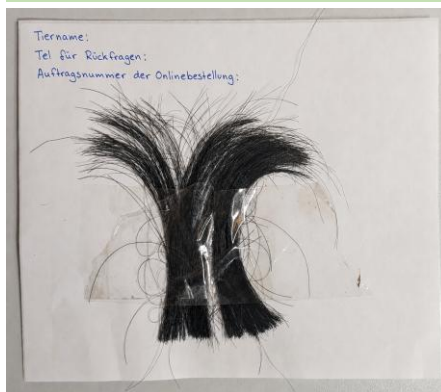

Mitgelieferter
Versandbeutel

➡ pro Probenkarte eine Verpackung

Papier Briefumschlag

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- PFERD

Haarwurzeln


generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Probenversand vorbereiten

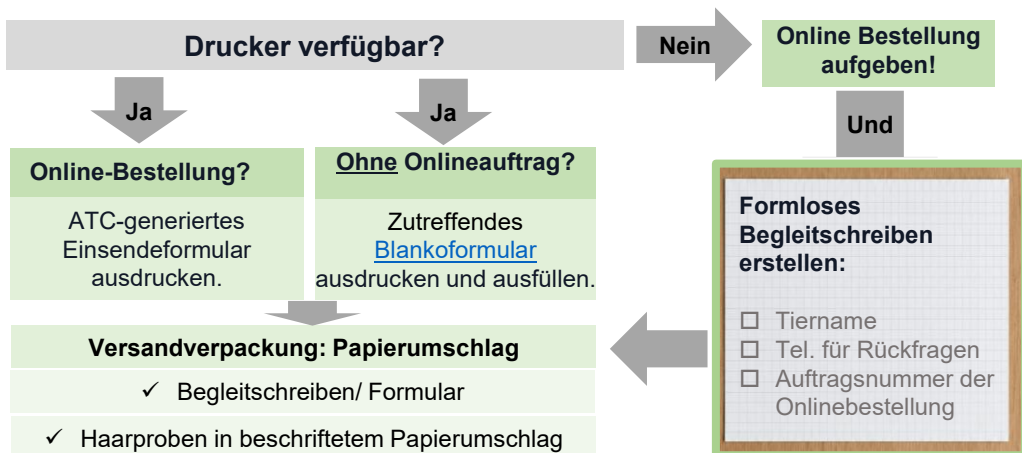

Versandanleitung



Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- PFERD

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com


EDTA-Blutprobe (nur durch vet. Fachpersonal)

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Vorbereitungen

□ Röhrchen für EDTA-Blut beschriften

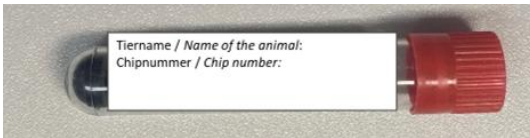

Probenahme

- ➡ 2- 3 ml Blut entnehmen.
- ➡ Blut sorgfältig mit EDTA durch mehrmaliges invertieren mischen.
- ➡ EDTA-Blutröhrchen und Decke **bitte nicht** zusätzlich mit Parafilm verschließen.
- 👉 Probe vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- 👉 Bei Versand später als 2 Tagen: Probenröhrchen im Kühlschrank zwischenlagern.

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- PFERD

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

EDTA-Blutprobe (nur durch vet. Fachpersonal)

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Fertiges EDTA-Blutröhrchen



Beschriftetes Röhrchen mit EDTA-Blut
bruchsicher in Transporthülse verpacken.

Probenversand vorbereiten

Drucker verfügbar?

Nein

Online Bestellung
aufgeben!

Ja

Ja

Online-Bestellung?

ATC-generiertes
Einsendeformular
ausdrucken.

Ohne Onlineauftrag?


Zutreffendes
[Blankoformular](#)
ausdrucken und ausfüllen.

Und

**Formloses
Begleitschreiben
erstellen:**

- ☐ Tiername
- ☐ Tel. für Rückfragen
- ☐ Auftragsnummer der
Onlinebestellung

Verpackung: Reisefester/wattierter Umschlag

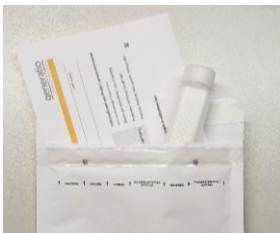

Versandanleitung



Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax