



Anleitungen zur Probenahme- HUND

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

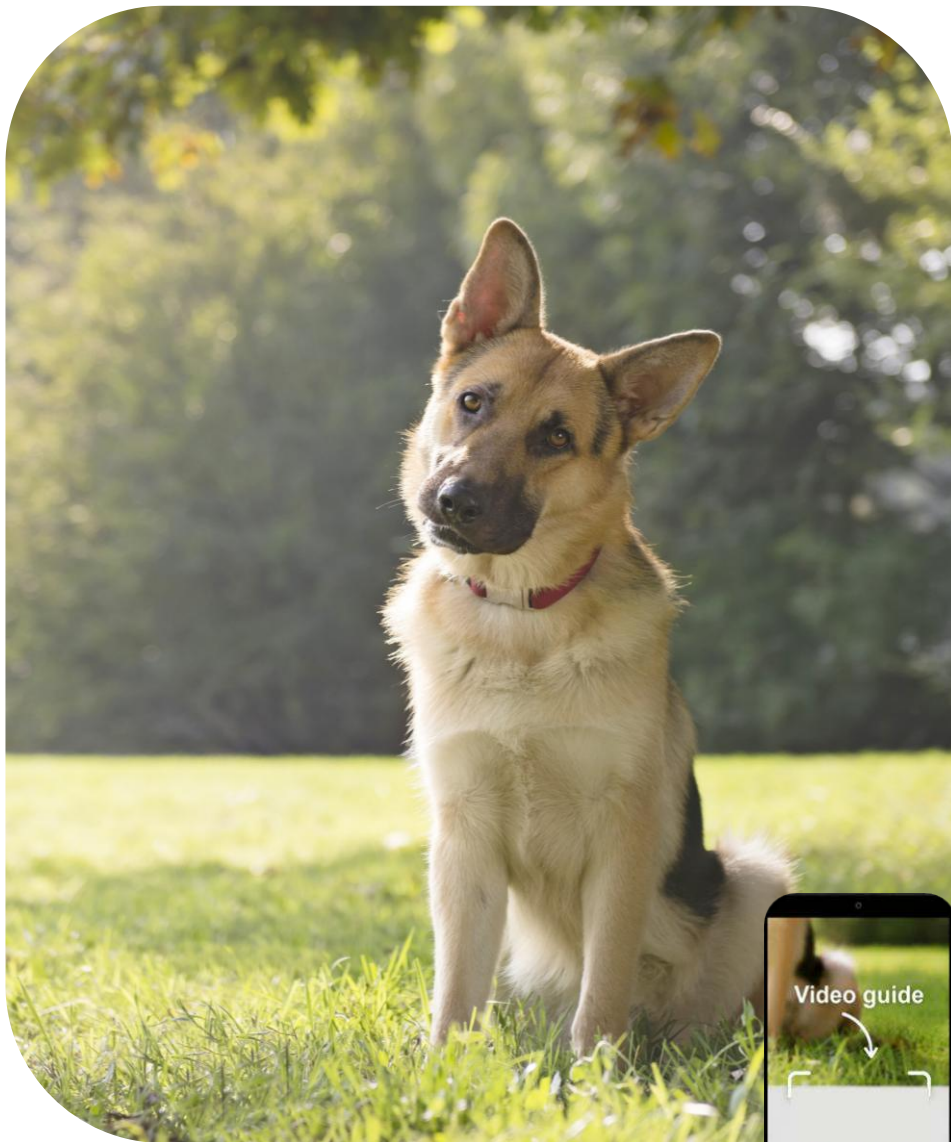

- ✓ GOcard/FTAcad Blutkarte
- ✓ Schleimhautabstrich
- ✓ EDTA-Blutprobe (nur vet. Personal)

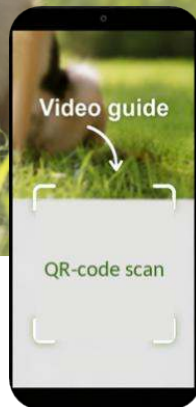

Anleitungen zur Probenahme- HUND

GOcard/FTAcad Blutkarte

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.


Vorbereitungen

□ GOcard / FTAcad ausfüllen

GOcard®-SC Tierregistrierung Animal registration Inscripción del animal generatio Center for Animal Genetics & Animal Trust Center Blumenstr. 49 69115 Heidelberg Germany - Alemania	 Die Nummer des Online-Auftrags lautet: Associated online order no. La correspondiente orden en línea # X Ein Auftragsformular liegt bei: Order form is attached Se adjunta una lista de los exámenes
☒ Einsender / sender / remitente	☒ Tiername / name of animal / nombre del animal
☒ Unterschrift / signature / firma	☐ Chip / tattoo


Probenahme

Ohr reinigen
(Alkoholtupfer)

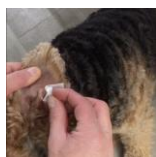


1

Sicherungsstift der Lanzette
durch Drehen entfernen

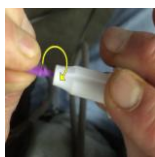

2

Lanzette fest aufsetzen-
dann auslösen

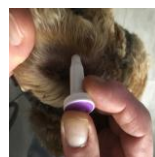


3

Blutstropfen abwarten,
ggf. zur Punktionsstelle
massieren



4

Blut auf saubere
GOcard auftragen

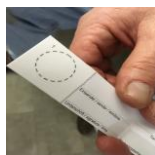

5

Blutropfen an der
Luft trocknen



6

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- HUND

GOcard/FTAcad Blutkarte

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com


Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Beladene GOcard/FTAcad

	X Einsender / sender / remitente	X Tiename / name of animal / nombre del animal	Notes
	X Unterschrift / signature / firma	Chip / tattoo	

Probenversand vorbereiten

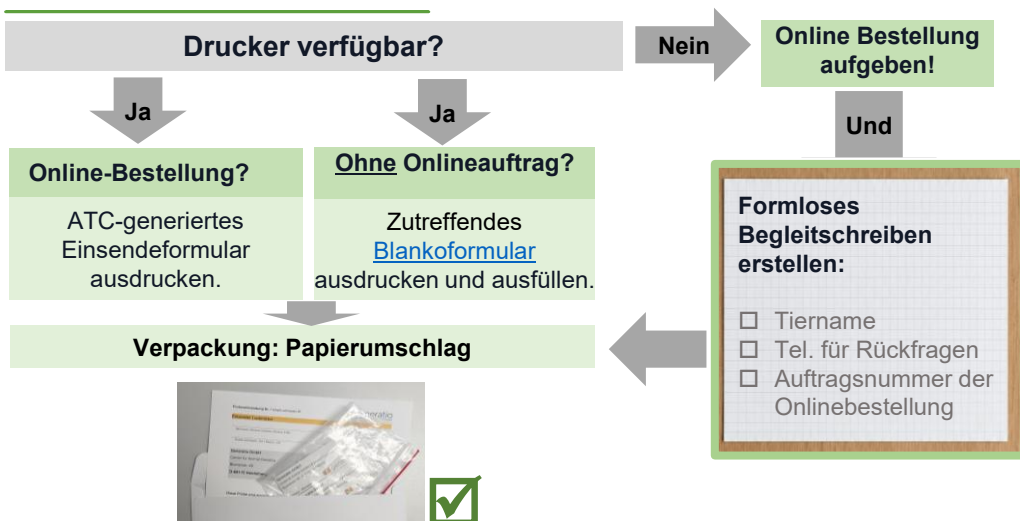

Versandanleitung



Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- HUND

Schleimhautabstrich

generatio


Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Vorbereitungen

❑ Röhrchen für Schleimhautabstrich beschriften

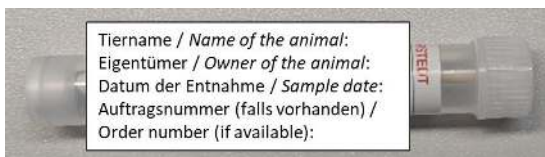

Probenahme

- 1  Röhrchen durch Drehen öffnen und Abstrichstäbchen herausziehen.
 - 2  Stäbchen vorsichtig zwischen Wange und Zahnfleisch einführen.
 - 3  Stäbchen ca. 20 Sekunden fest an der Wangeninnenseite reiben.
 - 4  Stäbchen direkt zurück ins Röhrchen stecken
-  Wdh. mit 2. Stäbchen



Bei unseren Entnahmesets müssen die Stäbchen nicht trocken zurück ins Röhrchen, sodass sie 40 Minuten sparen.



Falls Sie uns Schleimhautproben **ohne Entnahmeset** zuschicken, verwenden Sie bitte **handelsübliche Wattestäbchen**. Lassen sie die Stäbchen bitte **mind. 20 Minuten** an der Raumluft **trocknen**. Gewährleisten Sie bitte, dass Wattestäbchen verschiedener Tiere keinen Kontakt miteinander haben (dafür die Stäbchen z.B. einzeln in Papierumschläge verpacken und jeweils entsprechend der Vorbereitungen beschriften).

Hinweise

-  frühestens 2h nach letzter Fütterung.
-  Tupfer mit nichts außer der Probe in Kontakt bringen.
- Tier von anderen Tieren separieren-
DNA-Kontamination ausschließen.
-  Bei Welpen: Abstrich erst nach Ende der Sägezeit.

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- HUND

Schleimhautabstrich


generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com


Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Fertiges Röhrchen mit Schleimhautabstrich

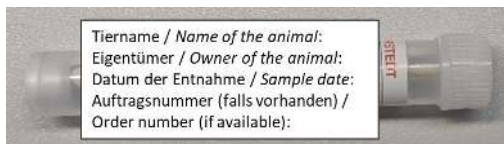

Probenversand vorbereiten

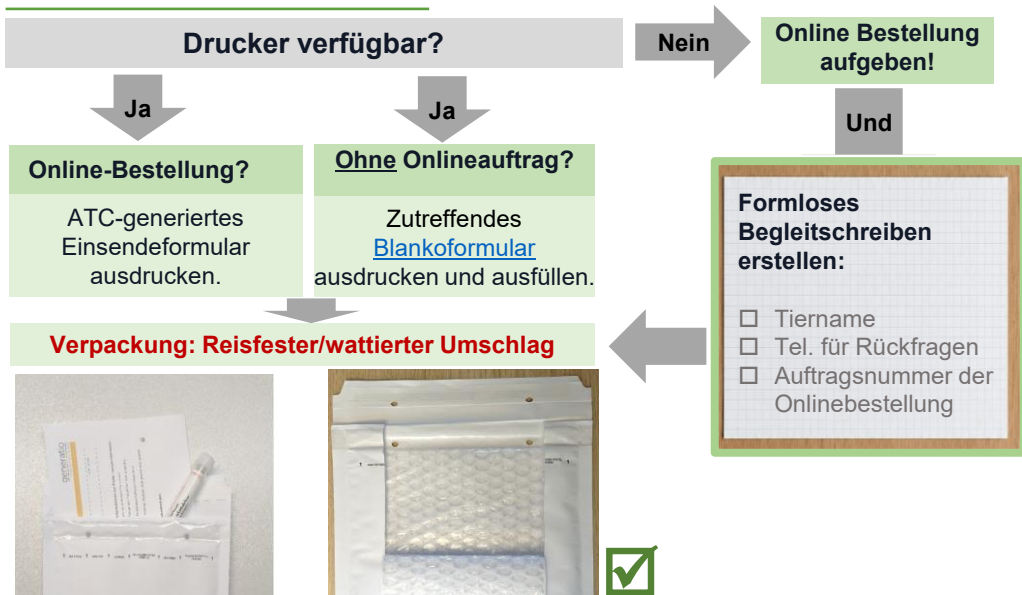

Versandanleitung



Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- HUND

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com


EDTA-Blutprobe (nur durch vet. Fachpersonal)

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Vorbereitungen

□ Röhrchen für EDTA-Blut beschriften

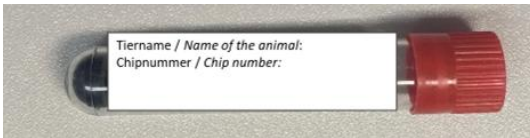

Probenahme

- ➡ 2- 3 ml Blut entnehmen.
- ➡ Blut sorgfältig mit EDTA durch mehrmaliges schwenken mischen.
- ➡ EDTA-Blutröhrchen und Decke **bitte nicht** zusätzlich mit Parafilm verschließen.

Hinweise

- 👉 Probe vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- 👉 Bei Versand später als 2 Tagen: Probenröhrchen im Kühlschrank zwischenlagern.

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme- HUND

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

EDTA-Blutprobe (nur durch vet. Fachpersonal)

Wichtige Hinweise:


1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Fertiges EDTA-Blutröhrchen



Beschriftetes Röhrchen mit EDTA-Blut
bruchsicher in Transporthülse verpacken.

Probenversand vorbereiten

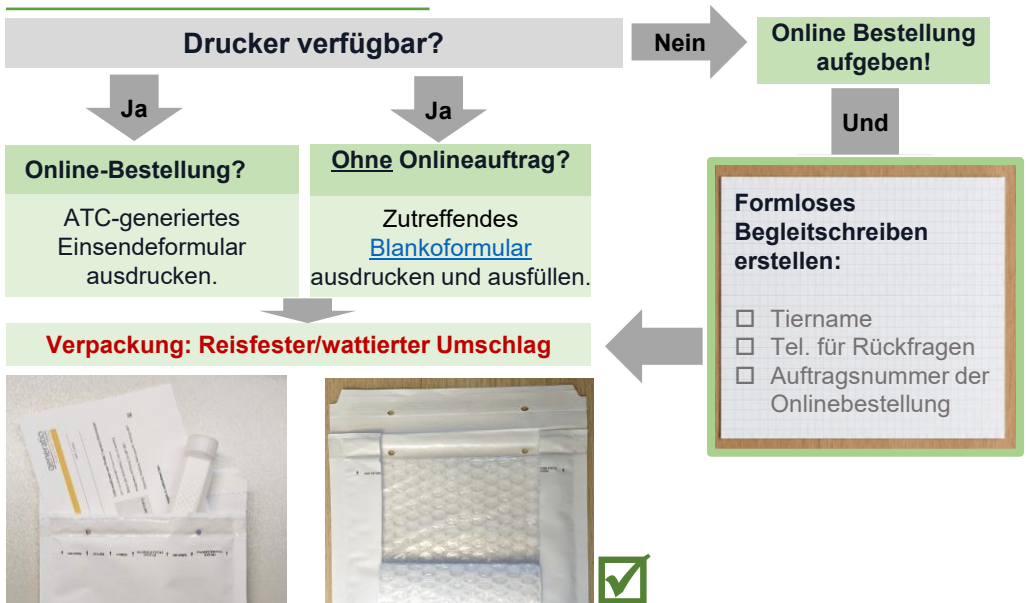

Versandanleitung



Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax