


Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

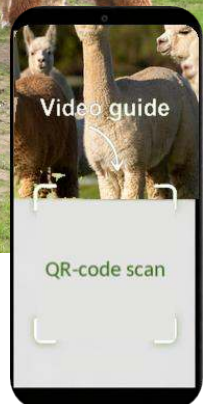

- ✓ Haarwurzeln
- ✓ EDTA-Blutprobe (nur vet. Personal)

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

Haarwurzeln

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.


Umschlag mit Haarproben vorbereiten

Papierumschlag ihrer Wahl verwenden

Papierumschlag außen beschriften

Benötigte Angaben zur Haarprobe:

- ☐ Tiername
- ☐ Tel. für Rückfragen
- ☐ Auftragsnummer der Onlinebestellung

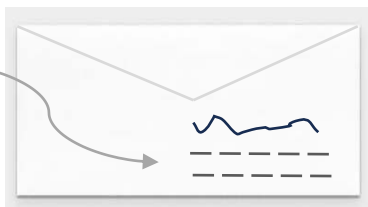

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Haarwurzeln

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Probenahme

➡ Zwei fingerdicke Haarbündel mit Haarwurzeln aus dem Schwanzbereich gewinnen

➡ Haarbündel mit Klebestreifen zusammenhalten

Videoanleitung



Hinweise

👉 **Anforderungen an die Haare vor Entnahme:**

- Trocken
- Frei von Pflegeprodukten

Fertiger Probenumschlag mit Alpakahaarwurzeln

Papierumschlag außen beschriftet:

- ✓ Tiername
- ✓ Tel. für Rückfragen
- ✓ Auftragsnummer der Onlinebestellung

Im Umschlag:

- ✓ zwei „fingerdicke“ Haarbündel
- ✓ mit Klebestreifen gebündelte Haare mit Haarwurzeln



Bei Haarproben von mehreren Tieren - Haarproben jeweils in einzelnen Briefumschlägen verpacken!

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

Haarwurzeln


generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Probenversand vorbereiten

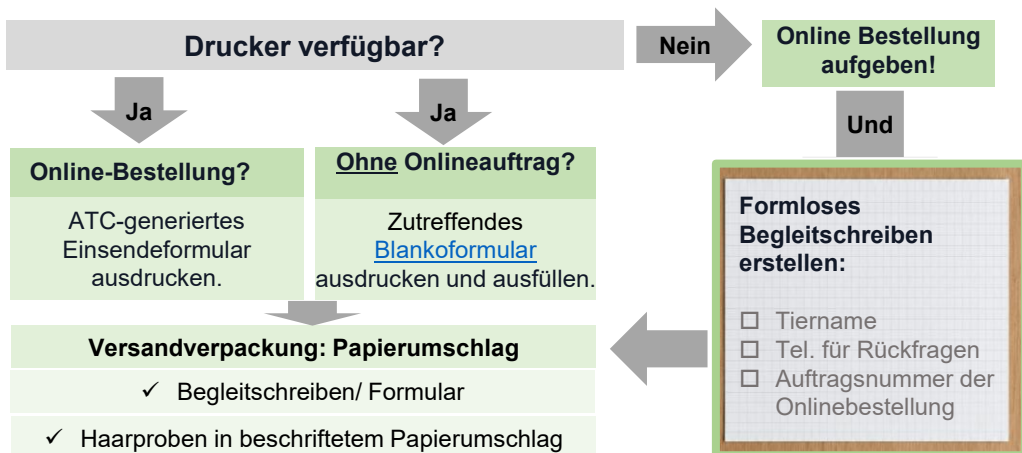

Versandanleitung



Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com


EDTA-Blutprobe (nur durch vet. Fachpersonal)

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Vorbereitungen

☐ Röhrchen für EDTA-Blut beschriften

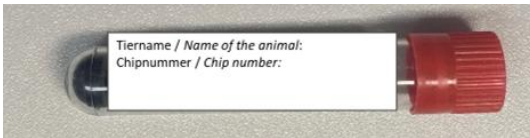

Probenahme

- ➡ 2- 3 ml Blut entnehmen.
- ➡ Blut sorgfältig mit EDTA durch mehrmaliges invertieren mischen.
- ➡ EDTA-Blutröhrchen und Decke **bitte nicht** zusätzlich mit Parafilm verschließen.
- 👉 Probe vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- 👉 Bei Versand später als 2 Tagen: Probenröhrchen im Kühlschrank zwischenlagern.

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

generatio

Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

EDTA-Blutprobe (nur durch vet. Fachpersonal)

Wichtige Hinweise:

1. Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.
2. Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.

Fertiges EDTA-Blutröhrchen



Beschriftetes Röhrchen mit EDTA-Blut
bruchsicher in Transporthülse verpacken.

Probenversand vorbereiten

Drucker verfügbar?

Nein

Online Bestellung
aufgeben!

Ja

Ja

Online-Bestellung?

ATC-generiertes
Einsendeformular
ausdrucken.

Ohne Onlineauftrag?


Zutreffendes
[Blankoformular](#)
ausdrucken und ausfüllen.

Und

**Formloses
Begleitschreiben
erstellen:**

- ☐ Tiername
- ☐ Tel. für Rückfragen
- ☐ Auftragsnummer der
Onlinebestellung

Verpackung: Reisfester/wattierter Umschlag

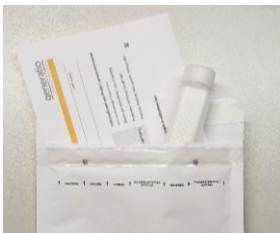

Versandanleitung



Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax